

# Bariatric Trapeze



## Assembly, Installation and Operating Instructions

Model Nos. BARTRAP

Yes, you can.<sup>®</sup>

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

*NOTE: Check ALL parts for shipping damage. In case of shipping damage, DO NOT use. Contact Dealer/Carrier for further instructions.*

## Safety Summary

To ensure the safe and proper installation of the Bariatric Trapeze, these instructions must be followed:

### **⚠ WARNING**

**DO NOT** install or use this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the **Warnings, Cautions or Instructions**, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

The Bariatric Trapeze, used in conjunction with a bed, can assist an individual weighing up to 1000 lbs (453.6 kg). The Bariatric Trapeze is designed to provide support, increase stability and assist the user when repositioning himself/herself in bed. The Bariatric Trapeze is not designed, however, to support the total body weight of an individual. Use it for assistance only.

Always be aware of the location of the boom tube, base assemblies, and grab bar - otherwise, injury or damage may occur.

**DO NOT** store grab bar on the boom tube or mast - otherwise, injury or damage may occur.

**DO NOT** install or adjust trapeze while bed is occupied.

Ensure that the snap buttons in the base assemblies fully protrude through the holes in the A-frame. This ensures that the base assemblies are properly installed and securely locked in position.

After installation and before use, ensure all attaching hardware is tight and secure at all times.

**ALWAYS** rotate Trapeze so the grab bar is directly above the individual using the grab bar. Grab bar should be grasped with both hands and pulled straight down. **DO NOT** pull grab bar at an angle - otherwise injury or damage may occur.

Ensure that the trapeze clamp is securely tightened before using the trapeze, otherwise injury may occur.

Ensure that the quick release pin is securely locked in place before using the trapeze, otherwise injury may occur.

After positioning unit, ensure locking casters on the bed assembly are in the locked position. Failure to lock bed casters can result in bed movement during trapeze use and result in possible injury or property damage.

### **⚠ ACCESSORIES WARNING**

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

---

## Assembling the Trapeze

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

NOTE: Invacare recommends that two people assemble the Bariatric Trapeze.

---

### **⚠ WARNING**


**The weight of the Bariatric Trapeze components are between 17 lbs (7.72 kg) and 21 lbs (9.53 kg). Use proper lifting techniques (lift with your legs) to avoid injury.**

---

1. Remove shipping end caps (yellow) from A-frame.
2. Insert the base assemblies into the A-frame.
3. Depress the snap button on one base assembly and slide it into the A-frame until the snap button protrudes through the hole in the A-frame.

NOTE: The base assembly will lock when an audible "click" is heard.

4. Repeat STEP 3 for the other base assembly.
5. Slide the mast and boom tube assembly onto the A-frame, with the boom tube on the same side as the base assembly legs.
6. Loosen trapeze knob by turning counterclockwise.
7. Slide the trapeze clamp over the end of the boom tube.
8. Depress the snap button on the boom tube and slide the trapeze clamp over the snap button.
9. Adjust the trapeze. Refer to [Adjusting the Trapeze](#) on page 2.

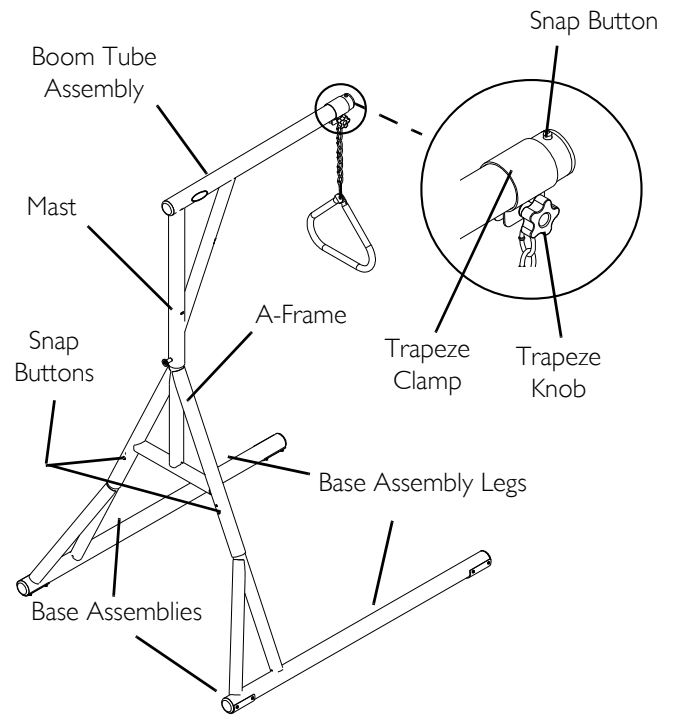

**FIGURE 1** Assembling the Trapeze

## Adjusting the Trapeze

---

### **⚠ WARNING**

**Ensure that the trapeze clamp is securely tightened BEFORE using the trapeze, otherwise injury may occur.**

---

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2 on page 3.

#### **Height**

1. Position the desired chain link onto the free "S" hook on the trapeze clamp (Detail "A").

#### **Position**

1. Loosen trapeze knob by turning counterclockwise (Detail "A").
2. Slide the clamp to desired position on the boom tube.
3. Secure the trapeze clamp to the boom tube by turning the knob clockwise.


#### **Rotation**

NOTE: The mast and boom tube can be rotated to three positions.

1. To adjust the rotation, pull out the quick release pin (Detail "B").
2. Move the trapeze to the desired position. There are three holes to choose from as shown in Detail "C".
3. Let go of the quick release pin once the trapeze is in the desired position. You should hear an audible "click" as the quick release pin enters one of the three holes and locks into place.

**⚠ WARNING**

**Ensure that the quick release pin is securely locked in place BEFORE using the trapeze, otherwise injury may occur.**

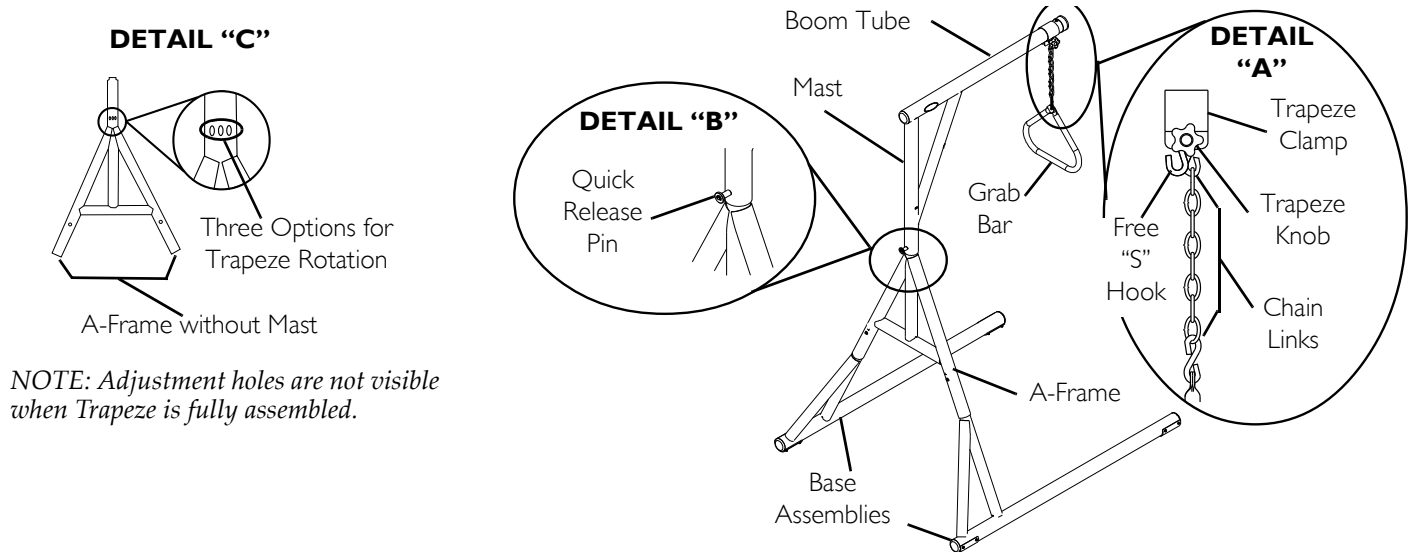

**FIGURE 2** Adjusting the Trapeze

**Trapeze Placement**


*NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 3.*

1. Position the trapeze at the head of the bed so the boom tube hangs over the bed.

*NOTE: Trapeze base positioning is dependant upon width of the bed.*

**⚠ WARNING**

**After positioning unit, ensure locking casters on the bed assembly are in the locked position. Failure to lock bed casters can result in bed movement during trapeze use and result in possible injury or property damage.**

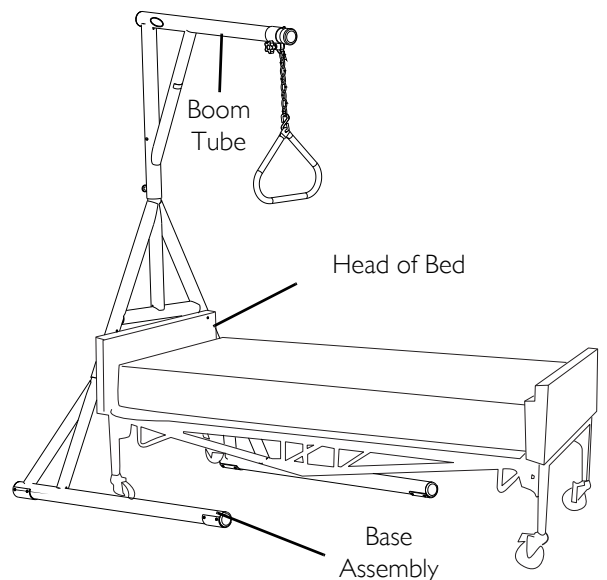

**FIGURE 3** Trapeze Placement

---

# LIMITED WARRANTY

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for three years from the date of purchase when purchased new and unused from Invacare or an authorized provider for the original purchaser. If within such warranty period this product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option, with refurbished or new parts. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of this product. Product repairs shall not extend this warranty - coverage for repaired product shall end when this limited warranty terminates. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS: PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUE: Vérifier si les pièces ont été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le fournisseur/transporteur pour plus d'informations.

## RÉSUMÉ DE SÉCURITÉ

Pour une installation et une utilisation sécuritaires du trapèze bariatrique, suivre TOUTES les instructions suivantes:

### ⚠ AVERTISSEMENTS

**NE PAS installer ou utiliser cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet d'instructions. Si vous ne comprenez pas ces avertissements, ces notes attention ou ces instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur, ou un technicien avant de tenter d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

**Le trapèze bariatrique, utilisé avec un lit, peut aider une personne pesant jusqu'à 1000 lbs (453.6 kg). Le trapèze bariatrique est conçu pour fournir du support, augmenter la stabilité et aider l'utilisateur à se replacer dans le lit. Toutefois, le trapèze N'est Pas conçu pour supporter tout le poids d'une personne. L'utiliser comme aide seulement.**

**Toujours noter l'emplacement du tube du treuil, de la base et de la poignée, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

**NE PAS entreposer la poignée ou le tube du treuil ou le mât- sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

**NE PAS installer ou régler le trapèze lorsque le lit est occupé.**

**S'assurer que les poussoirs de la base ressortent complètement des orifices du châssis en A. Ceci permet de s'assurer que l'ensemble de la base est installé correctement et bloqué sécuritairement.**

**Après l'installation et avant l'utilisation, s'assurer que toute la quincaillerie de fixation est bien serrée et sécuritaire, en tout temps.**

**TOUJOURS tourner le trapèze de façon à ce que la poignée soit directement au-dessus de l'utilisateur. La poignée doit être saisie avec les deux mains et tirée en ligne droite vers le bas. NE PAS tirer la poignée avec un angle, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

**S'assurer que la pince du trapèze est bien serrée, avant d'utiliser le trapèze, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

**S'assurer que la goupille est bien bloquée en place avant d'utiliser le trapèze, sans quoi des blessures peuvent survenir.**

**Une fois l'unité installée, s'assurer de bloquer les roulettes du lit, sinon le lit pourrait se déplacer pendant l'utilisation du trapèze et causer des blessures ou des dommages à la propriété.**

### ⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES

**Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et ne doivent pas être utilisés avec les produits Invacare.**

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

## Assembler le Trapèze

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

REMARQUE: Invacare recommande que l'assemblage du trapèze bariatrique soit effectué par deux (2) personnes.


### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Les composants du trapèze bariatrique pèsent entre 17 lbs (7.72 kg) et 21 lbs (9.53 kg). Utiliser les bonnes techniques pour forcer (forcer avec les jambes) pour éviter les blessures.**

1. Enlever les capuchons jaunes de transport du châssis en A.
2. Insérer la base dans le châssis en A.
3. Enfoncer le poussoir d'une des bases et l'insérer dans le châssis en A jusqu'à ce qu'il ressorte complètement et qu'un déclic soit entendu. Répéter pour l'autre pièce de la base.

REMARQUE : Le montage de base se verrouille lorsqu'un « clic » se fait entendre.

4. Répétez l'ÉTAPE 3 pour tout autre montage de base.
5. Glissez le montage du mât et du tube de la membrure sur le cadre A en vous assurant d'orienter le tube de la membrure du même côté que le montage des pattes.
6. Desserrez la poignée du trapèze en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
7. Glissez la pince du trapèze par-dessus l'extrémité de la membrure.
8. Enfoncez le bouton-pression de la membrure et glissez la pince du trapèze par-dessus le bouton-pression.
9. Régler le trapèze. Se référer à Régler le Trapèze de la page 6.

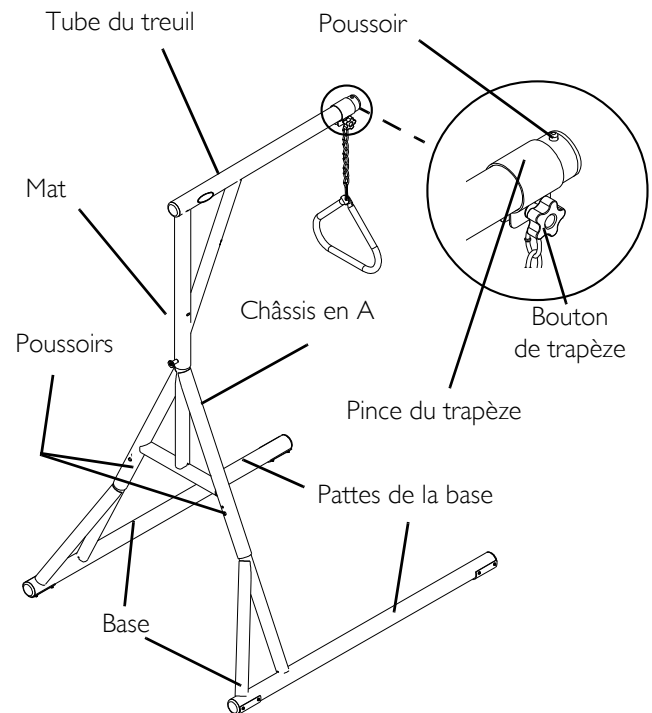

**FIGURE 1** Assembler le Trapèze

## Régler le Trapèze

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 2.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**S'assurer que la pince du trapèze est bien serrée AVANT d'utiliser le trapèze, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.**

### Hauteur

1. Placer le maillon de chaîne voulu sur le crochet en S sur la pince du trapèze (schéma "A").

### Position

1. Desserrez le bouton du trapèze en tournant dans LES SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (SCHÉMA "A").
2. Glisser la pince à la position voulue sur le tube du treuil.
3. Fixer la pince du trapèze en vissant le bouton dans LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.


### Rotation

REMARQUE: Le mât et le tube du treuil peuvent être tournés dans trois positions.

1. Pour régler la rotation, enlever la goupille. (SCHÉMA "B").
2. Déplacer le trapèze à la position voulue. Il y a trois (3) orifices possibles tel qu'illustré au SCHÉMA "C".
3. Replacer la goupille lorsque le trapèze est à la position voulue. La goupille devrait émettre un déclic lorsqu'elle est bloquée dans l'un des trois (3) orifices.

## ⚠ AVERTISSEMENT

**S'assurer que la goupille est bien bloquée en place AVANT d'utiliser le trapèze, sans quoi des blessures peuvent survenir.**

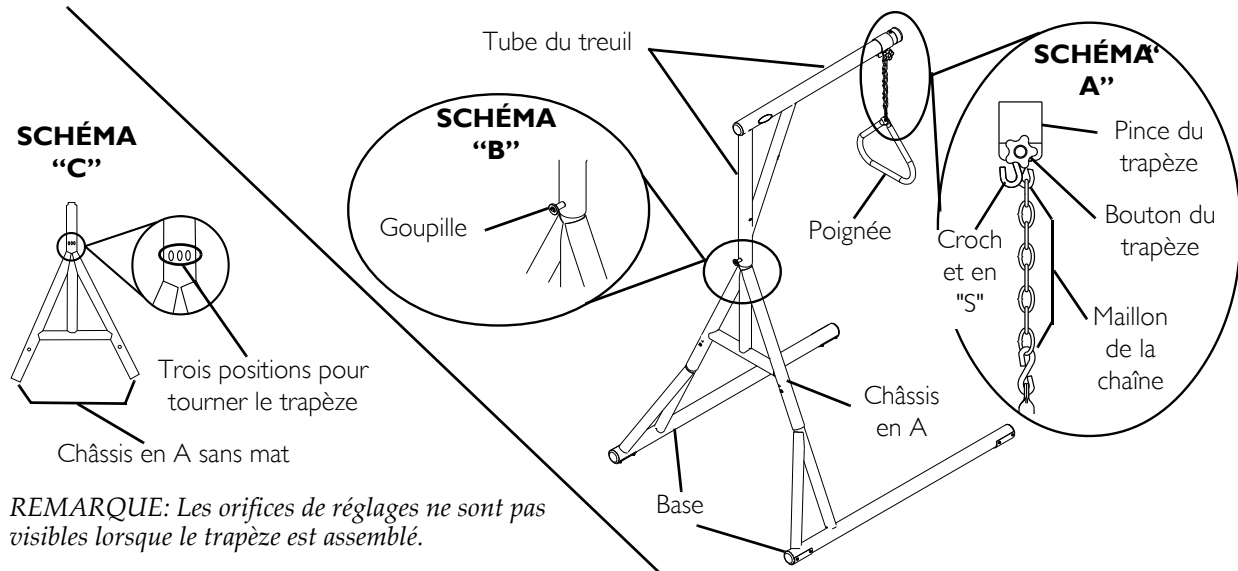

**FIGURE 2** Régler le Trapèze

## Installation du Trapèze


*REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 3.*

1. Placer le trapèze à la tête du lit de manière à ce que le mât soit au-dessus du lit.

*NOTE: La position de la base du trapèze dépend de la largeur du lit.*

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Une fois l'unité installée, s'assurer de bloquer les roulettes du lit, sinon le lit pourrait se déplacer pendant l'utilisation du trapèze et causer des blessures ou des dommages à la propriété.**

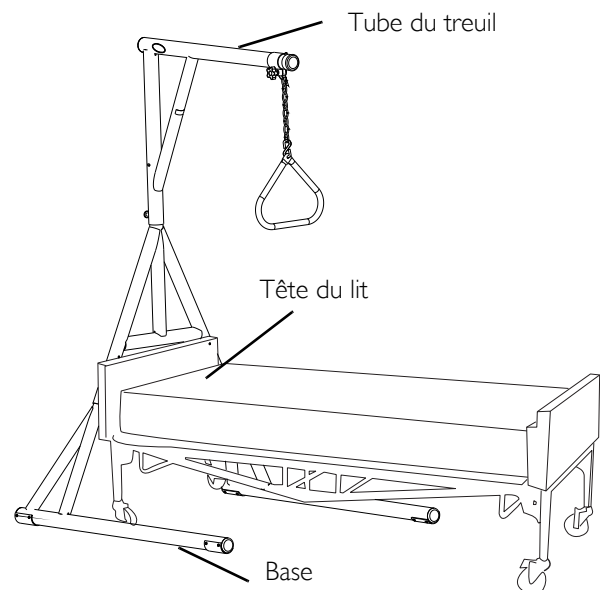

**FIGURE 3** Installation du Trapèze

# GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (provinces) à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant trois ans à compter de la date d'achat lorsque ce produit est acheté à l'état neuf ou inutilisé chez Invacare ou chez un fournisseur autorisé. Si, lors de cette période de garantie, ce produit est jugé défectueux, ledit produit sera réparé ou remplacé selon le choix de Invacare avec des pièces réusinées ou neuves. Cette garantie ne comprend pas les frais de main d'œuvre ou d'expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation de ce produit. Les réparations de produit ne prolongent pas cette garantie; la protection du produit réparé se termine en même temps que cette garantie restreinte. La seule obligation d'Invacare et votre seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement des pièces et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur ou vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série si le produit en a un.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification dans les trente (30) jours suivant la date de l'autorisation de retour. Inscire le numéro de série s'il y a lieu. Ne pas retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés; veuillez acquitter les frais de livraison.

**RESTRICTIONS: LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ OU EFFACÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, OU AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS), AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, ET UNE TELLE ÉVALUATION SERA DÉTERMINÉE UNIQUEMENT PAR INVACARE. LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE OU DU NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, NE DOIVENT SE PROLONGER AU-DELA DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.**

**CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).**

Invacare Corporation

[www.invacare.com](http://www.invacare.com)



*Yes, you can.*

**USA**

One Invacare Way  
Elyria, Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**

570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z 4G4 Canada  
800-668-5324

© 2010 Invacare Corporation. All rights reserved. Reproduction, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by <sup>TM</sup> and <sup>®</sup>. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

Part No 1106663

Rev E - 3/10

